

Secura® y Quintix® Rendimiento de Primera Clase en el Rango de 5 Dígitos



Las Nuevas Semi-Microbalanzas: Las Mejores en su Clase

Las nuevas semi-microbalanzas Sartorius presentan la mejor tecnología de pesaje disponible dentro de su clase de 5 dígitos en el mercado del segmento estándar actual. Ofrecemos una selección única que pone a su disposición cinco modelos diferentes a elegir. Estas semi-microbalanzas proporcionan un rendimiento excepcional a un precio razonable. Adicionalmente, están respaldadas por las excelentes normas de calidad de los productos "Made in Germany".

Rendimiento Superior

Las últimas tecnologías para un mayor rendimiento: Benefíciese de la repetibilidad y la linealidad inmejorables en el rango semi-micro.

Diseño Fácil de Limpiar

Protector contra corrientes extraíble y base de la cámara de pesaje desmontables: Todas las partes del protector contra corrientes y la cámara de pesaje pueden desmontarse rápida y fácilmente – lo cual garantiza los mejores resultados posibles de limpieza. Y si accidentalmente derrama algún líquido o muestra granular mientras realiza el pesaje, esto no representa un problema para estas cinco nuevas balanzas. La base de la cámara de pesaje se caracteriza por un nuevo diseño revolucionario de montaje que puede extraerse completamente de la cámara y limpiarse fácilmente.




Función Start Assistant e interfaz del usuario SmartTouch: Estas características fáciles de entender simplifican la instalación y el trabajo con las nuevas semi-microbalanzas. Olvídese de tener que leer un manual de instrucciones. Las instrucciones en la pantalla le muestran todo lo que necesita saber – ayudándole a incrementar la eficiencia de pesaje en su laboratorio.

Protector Contra Corrientes Ergonómico

Tecnología suave: Las puertas laterales del protector contra corrientes abren con suavidad, permitiéndole cargar una muestra convenientemente – sin ningún percance. El protector contra corriente está diseñado para compensar las condiciones ambientales, reduciendo su impacto sobre sus resultados de pesaje al mínimo.

Ahorrador de Espacio

Espacio compacto y electrónica integrada: Ahorre hasta 36% de espacio comparado con otros modelos de la competencia gracias al diseño compacto y la electrónica integrada de estas semi-microbalanzas.

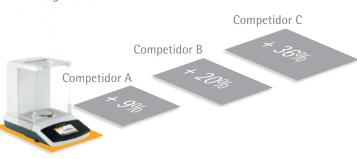

Accesorios

Platillos de Pesada

No. de Orden	Descripción
YSP01SQP	Platillo de pesada, 80 mm, ranurado
YWP01SQP	Platillo de pesada, 90 mm; Incluye kit de conversión
YFW01SQP	Platillo de pesada filtros, 130 mm

Paquete de Batería Recargable

No. de Orden	Descripción
YRB11Z	Para balanzas de laboratorio estándar

Impresora

No. de Orden	Descripción
YDP30	Impresora de Laboratorio Premium GLP
69Y03285	Juego de papel estándar y cartucho de tinta
69Y03286	Juego de etiquetas autoadhesivas y cartucho de tinta
69Y03287	Papel térmico estándar
69Y03288	Papel térmico autoadhesivo

Cables para la Comunicación de Datos

No. de Orden	Descripción
YCC04-D09	Cable para comunicación de datos, USB USB A
YCC03-D09	Cable para comunicación de datos, mini USB RS232, 9-contactos
YCC03-D25	Cable para comunicación de datos, mini USB RS232, 25-contactos

Kit de Densidad

No. de Orden	Descripción
YDK05	Para semi-microbalanzas

Cubiertas Protectoras

No. de Orden	Descripción
6960SE04	Cubierta para polvo
6960MA03	Cubierta para polvo en uso





Platillo de pesada, 80 mm, para incrementar el rendimiento de pesaje



Platillo de pesada, 90 mm; incluye kit de conversión



Platillo de pesada filtro, 130 mm

Características Únicas para un Mayor Rendimiento y Flexibilidad

Los cinco modelos cuentan con las características Secura® y Quintix® que mejorarán la eficiencia de sus procesos:

Transferencia de Datos Más Rápida

Sólo conecte la balanza a su computadora y comience a pesar inmediatamente – sin la necesidad de un software adicional. Gracias a la tecnología Plug & Play, sus resultados de pesaje se transferirán instantáneamente al programa de su elección. Como resultado realiza un "cálculo numérico" rápido y fácil usando hojas de trabajo estándar.

Ajuste Automático

La función isoCAL de ajuste integrada le alertará cuando haya transcurrido un intervalo definido o se haya excedido un límite de temperatura. La balanza posteriormente realizará un ajuste automático de sensibilidad usando su peso interno. Si la balanza le indica que está lista para realizar el

ajuste mientras está realizando un pesaje, sólo toque el botón para llevar a cabo el ajuste más tarde. Cada procedimiento de ajuste se documenta por la función de Registro de Auditoría Cal y es 100% rastreable para su control de calidad.



Documentación GLP | GMP

Imprima sus resultados de pesaje en segundos en cumplimiento con GLP | GMP. Adicionalmente, la impresión de fecha y hora le permitirá generar registros rastreables. En las balanzas Secura®, puede inclusive personalizar la impresión de acuerdo con sus requerimientos específicos. Las características agregadas en las semimicrobalanza Secura® hacen que su laboratorio funcione de forma aún más fácil y fiable:

Monitoreo Continuo de Nivel

La función integrada LevelControl revisa que su Secura® esté nivelada. Detecta cualquier desnivelación

inmediatamente, mostrándole en la pantalla los pasos que necesita realizar para nivelar la balanza correctamente.



Identificación de Muestra y Lote

Use la función de identificación conectada a la semi-microintegrada para asignar IDs únicos alfanuméricos a sus muestras y lotes. Con la impresora de laboratorio YDP30 etiquetas continuas.

balanza podrá imprimir sus datos fácil e individualmente sobre papel estándar o

Protección de Contraseña Segura

Active la función de contraseña para proteger todos sus ajustes de cualquier cambio no intencionado que pudieran alterar el desempeño metrológico de su balanza.

De esta forma podrá garantizar que Secura® proporcione resultados de pesaje seguros.

Especificaciones Técnicas

Semi-Microbalanza Secura®			
Modelo		225D	125
Rangos de capacidad de pesaje	g	60 120 220	60 120
Rangos de legibilidad	mg	0,01 0,01 0,1	0,01 0,01
Repetibilidad (desviaciones estándar)	mg	0,02 0,04 0,07	0,02 0,04
Linealidad	mg	0,1 0,1 0,2	0,1 0,1
Punto de inicio del rango de operación de acuerdo a USP, típico*	mg	25	25
Desviación de sensibilidad entre +10°C+30°C (50°F86 °F)	± ppm/K	1	1
Tiempo de estabilización estándar	S	6 6 2	6 6
isoCAL: – Cambio de temperatura – Intervalo de tiempo	K h	1,5 4	1,5 4
Velocidad de actualización de pantalla (depende del nivel de filtro seleccionado)	mm	0,2 0,4	0,2 0,4
Tamaño del Platillo de Pesada		∅ 80 (∅ 90 opcional)	Ø 80(Ø 90 opcional)
Altura de la cámara de pesaje	mm	218	218
Peso neto, aproximado	kg	7,8	7,8
Dimensiones $Pr \times An \times Al$ (mm)	mm pulgadas	376×214×316 14,8×8,4×12,4	







Semi-Microbalanza Quintix®				
Modelo		125D	65	35
Rangos de capacidad de pesaje	g	40 60 120	40 60	30
Rangos de legibilidad	mg	0,01 0,01 0,1	0,01 0,01	0,01
Repetibilidad (desviaciones estándar)	mg	0,02 0,04 0,07	0,02 0,04	0,03
Linealidad	mg	0,1 0,1 0,2	0,1 0,1	0,1
Desviación de sensibilidad entre +10°C+30°C (50°F86°F)	± ppm/K	1	1	1
Tiempo de estabilización estándar	S	6 6 2	6 6	6
isoCAL: - Cambio de temperatura - Intervalo de tiempo	K h	1,5 4	1,5 4	1,5 4
Velocidad de actualización de pantalla (depende del nivel de filtro seleccionado)	S	0,2 0,4	0,2 0,4	0,2 0,4
Tamaño del Platillo de Pesada	mm	∅ 80(∅ 90 opcional)	∅ 80 (∅ 90 opcional)	∅ 80 (∅ 90 opcional)
Altura de la cámara de pesaje	mm	218	218	218
Peso neto, aproximado	kg	7,8	7,8	7,8
Dimensiones Pr × An × Al (mm)	mm	$376 \times 214 \times 316$		

 $14.8 \times 8.4 \times 12.4$

^{*} en combinación con platillo de pesada, 80 mm, ranurado YSP01SQP

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG Weender Landstrasse 94–108 37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0 Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France 2, rue Antoine Laurent de Lavoisier ZA de la Gaudrée 91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00 Fax +33.1.64.59.76.39

Austria

Sartorius Austria GmbH Modecenterstrasse 22 1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0 Fax +43.1.7965760.24

Belaium

Sartorius Belgium N.V. Leuvensesteenweg, 248/B 1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71 Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy Laippatie 1 00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951 Fax +358.9.755.95.200

Hungary

Sartorius Hungária Kft. Kagyló u. 5. 2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227 Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd. Unit 41, The Business Centre Stadium Business Park Ballycoolin Road Dublin 11

Phone +353.1.8089050 Fax +353.1.8089388 Italy

Sartorius Italy S.r.l. Viale A. Casati, 4 20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1 Fax +39.039.4659.88

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001 Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o. ul. Wrzesinska 70 62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830 Fax +48.61.6473839

Russian Federation

LLC "Sartorius ICR" and LLC "Biohit" Uralskaya str. 4, Lit. B 199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327 Fax +7.812.327.5.323

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A. Avda. de la Industria, 32 Edificio PAYMA 28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.902.123.367 Phone Portugal +351.800.855.800 Fax Spain +34.91.358.96.23 Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG Ringstrasse 24a 8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00 Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd. Longmead Business Centre Blenheim Road, Epsom Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159 Fax +44.1372.726171

Ukraine

LLC "Biohit" Post Box 440 "B" 01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918 Fax +380.50.623.3162 America

USA

Sartorius Corporation 5 Orville Drive, Suite 200 Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249 Toll-free +1.800.635.2906 Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A. Int. A. Ávalos 4251 B1605ECS Munro Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505 Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda Avenida Senador Vergueiro 2962 São Bernardo do Campo CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900 Fax + 55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc. 2179 Dunwin Drive #4 Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977 Toll-Free +1.800.668.4234 Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México S.A. de C.V. Circuito Circunvalación Poniente No. 149 Ciudad Satélite 53100, Estado de México México

Phone +52.5555.62.1102 Fax +52.5555.62.2942

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd. Unit 5, 7-11 Rodeo Drive Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800 Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. 33 Yu An Road, Airport Industrial Park Zone B, Shunyi District, Beijing 101300, P.R.China

Phone +86.10.8042.6300 Fax +86.10.8042.6486 Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd. Unit 1012, Lu Plaza 2 Wing Yip Street Kwun Tong Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678 Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd. #69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra, Nelamangala Tq 562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250 Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Japan K.K. 4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg. 8-11, Kita-Shinagawa 1-chome Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.3740.5408 Fax +81.3.3740.5406

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd Lot L3-E-3B, Enterprise 4 Technology Park Malaysia Bukit Jalil 57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622 Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd 1 Science Park Road, The Capricorn, #05-08A, Singapore Science Park II Singapore 117528

Phone +65.6872.3966 Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd. 8th Floor, Solid Space B/D, PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700 Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd. 129 Rama 9 Road, Huaykwang Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6 Fax +66.2643.8367